


Instructions for Use: Battery Removal

Scope: These instructions cover R53905 and R53905-HALO Rocket Pro-Lux Proctoscopes and derivatives.

Indications: This device should only be used by or under the supervision of trained personnel and in conjunction with current local clinical practice guidelines.

Disposal: This device should be handled and disposed of in accordance with local hospital policy and with regard to all applicable regulations, including but without limitation to, those pertaining to human health & safety and care of the environment.

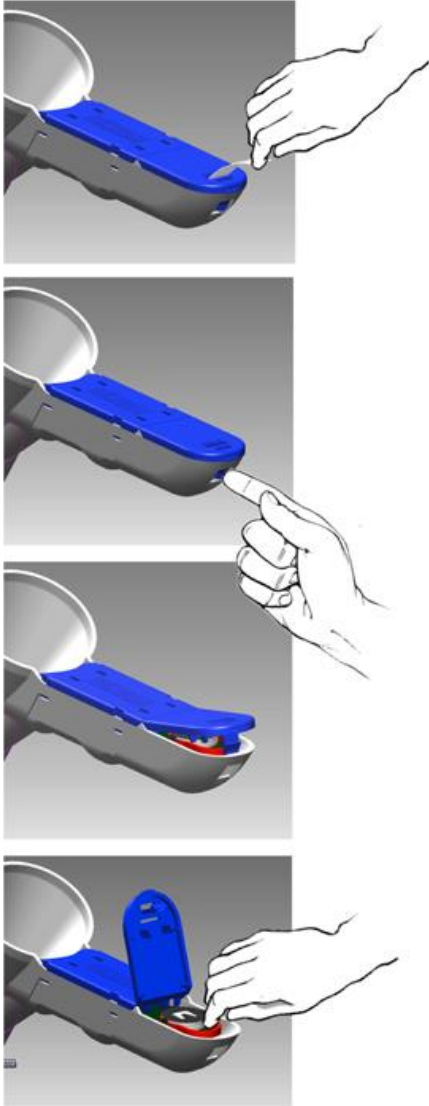

1. Remove tab to activate light source.
 2. Discard tab after removal.
 3. In accordance with local hospital policy, remove batteries before disposal.
 4. Push tab into handle to release battery cover.
 5. Lift cover to expose battery pack ready for removal.
 6. Pull the red tab shown to remove battery pack.
- HAZARD: Battery packs must NOT be allowed to come into contact with the batteries of other devices as they may short-out, leak fluid, overheat or explode.**
7. To ensure safety, place each battery pack into a separate cell of the disposal tray provided with each carton of Pro-Lux Proctoscopes.
 8. Dispose of the filled tray in accordance with local hospital policy.



This device is not manufactured with natural rubber latex



Rx ONLY



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
England, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com

EC REP

Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche,
Germany




Anweisungen zur Entsorgung der Batterie

Geltungsbereich: Diese Anweisungen beziehen sich auf alle NuSugix Pro-Lux Proktoskope und Derivate.

Anwendungsbereiche: Dieses Produkt sollte nur von oder unter Aufsicht von ausgebildetem Personal sowie in Einklang mit den aktuellen hiesigen Behandlungsrichtlinien verwendet werden.

Entsorgung: Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sollten im Rahmen der lokalen Krankenhausrichtlinien sowie der gesetzlichen Vorschriften u.a. hinsichtlich des Schutzes von Gesundheit & Sicherheit von Mensch und Umwelt erfolgen.

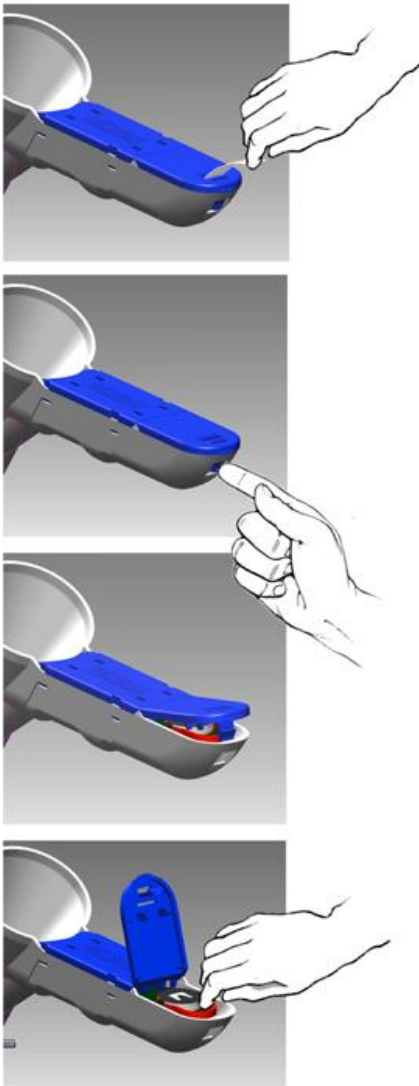

1. Entfernen Sie zur Aktivierung der Lichtquelle das Band.
 2. Entsorgen Sie das Band.
 3. Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien entsprechend den örtlichen Bestimmungen für Krankenhäuser.
 4. Drücken Sie den Verschluss in den Handgriff, um die Batterieabdeckung zu entfernen.
 5. Heben Sie die Abdeckung an, um auf die Batterien zugreifen zu können.
 6. Drücken Sie, wie dargestellt, auf den roten Verschluss, um die Batterien zu entfernen.
- GEFAHR: Batteriepacks dürfen nicht mit den Batterien der anderen Geräte in Kontakt geraten, da dies zu einem Kurzschluss, einem Leck, Überhitzung oder Explosion führen kann.**
7. Legen Sie zur Sicherheit jedes Batteriepack in eine separate Zelle der Entsorgungsablage, welche in jeder Packung von Pro-Lux-Proktoskopen enthalten ist.
 8. Entsorgen Sie die gefüllte Ablage gemäß den örtlichen Bestimmungen für Krankenhäuser.



Dieses Produkt wurde ohne Naturkautschuklatex hergestellt



Rx ONLY



ROCKET MEDICAL PLC
Sedling Road, Washington,
England, NE38 9BZ
www.rocketmedical.com

EC REP

Rocket Medical GmbH
Am Rosengarten 48,
15566 Schöneiche.
Germany

